

特別プライスカンパーン

合成化学の研究を支援する最新の
フラッシュクロマトグラフィテクノロジー

971-FPフラッシュ精製システム

従来のフラッシュクロマトグラフは、サイズが大きくドラフト
チャンバーに設置しにくく、UV波長も少なく利用しづらい
ものでした



¥1,700,000

特長

コンパクトな設計

幅32cmでドラフトチャンバー容易に設置
サイズ: W32 X D49 X H72cm

ボタンパネル

簡単ボタン操作で迅速操作が出来る
・マニュアルでフラクションをコレクト
・流速を分析中に変更
・グラジェントのホールド
・ベースラインの0補正
・コレクト中にノズルを移動させて試験管を
変更



UV7波長同時モニター

合成物や天然物を最大UV7波長同
時モニターでフラクションを逃すこと
が少なくなりました。

ラックマネジメント

サンプルIDごとに空の試験管を作ったり
列ごとにフラクションできるので、回収作業が容易
しかもコンパクト設計の割に大量の試験管ラックに対応




7つの手順で簡単に設定が出来ます。


1. <New> Runを選択する




2. カラムサイズを選択する

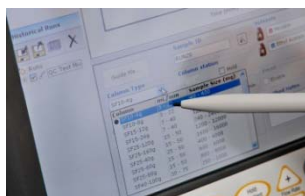


3. 溶媒選択、流量を設定する

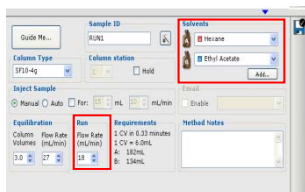

4. 検出器を設定します
(最大7波長、ELSDはオプション)

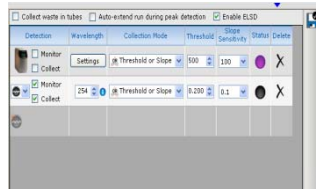

5. グラジエントプロフィールを設定する

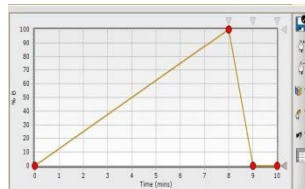


6. カラムを取り付ける



7. Playを押す



クロマトグラムと
各フラクションを簡単認識

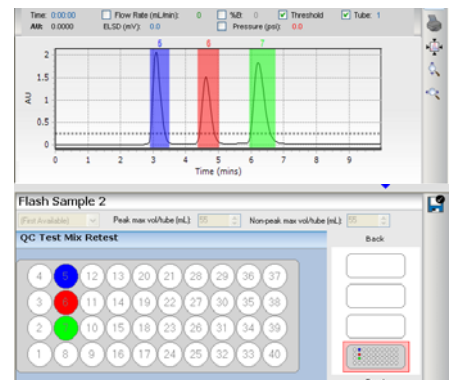

ご提供システム

971-FP フラッシュクロマトグラフ

特別プライス

¥1,700,000

但し、オプションは含まれていません。価格は税別金額です。

キャンペーン期間は2012年1月5日～4月27日です。

キャンペーン内容は予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください

問合せ・見積書のご請求は

アジレント・テクノロジー株式会社

〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1

カスタムコンタクトセンター

フリーダイヤル 0120-477-111

仕様・価格は予告なく変更する場合があります。

www.agilent.com/chem/jp