

# アジレント PFAS関連製品 サマーキャンペーン2026

PFAS分析を支える全アイテム、今だけ特別価格！

## PFAS分析に最適！ ポリプロピレン製バイアル・キャップ



部品番号	品名	価格（税別）
5191-8121	ポリプロピレン、PFCフリー、スクルーバイアル、100 個	¥3,000→キャンペーン価格¥2,400
5191-8151	スクルーキャップ、9mm,,透明、 薄型メンブレンポリプロピレン/シリコンセプタム、100個	¥2,000→キャンペーン価格¥1,600

選ばれている理由がある！水・土壌・食品まで幅広いラインナップ

## PFAS分析 固相抽出カートリッジ



部品番号	品名	価格（税別）
5610-2150	Bond Elut PFAS WAX、150 mg、6 mL、30 個	¥37,000→キャンペーン価格¥29,600
5610-2251	Bond Elut PFAS WAX、200 mg、6 mL、30 個	¥47,000→キャンペーン価格¥37,600
5610-2252	Bond Elut PFAS WAX、500 mg、6 mL、30 個	¥53,000→キャンペーン価格¥42,400
5610-2230	Captiva EMR PFAS Food I、6 mL、340 mg	¥25,000→キャンペーン価格¥20,000
5610-2231	Captiva EMR PFAS Food I、6 mL、680 mg	¥30,000→キャンペーン価格¥24,000
5610-2232	Captiva EMR PFAS Food I、6 mL、750 mg	¥30,000→キャンペーン価格¥24,000
5610-2247	Bond Elut Carbon S、PFAS 用、250 mg、 6 mL、30 個	¥24,000→キャンペーン価格¥19,200
5610-2237	Bond Elut 二層 PFAS WAX（上層）/Carbon S、 200/50 mg、6 mL（30 個）	¥45,000→キャンペーン価格¥36,000

## キャンペーン内容

キャンペーン対象製品はこちら

キャンペーン対象製品をお買い上げいただけると、  
キャンペーン期間中何度でも定価より**20 %OFF**でご提供いたします。



## キャンペーン期間 2026年10月2日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 3415** とご連絡ください。

<https://aglt.co/2026-Summer-PFAS>

### お願い/注意事項

※在庫状況により、納入までにお時間を頂く場合がございます。納期に余裕を見てご注文のご検討をお願いします。  
※本リーフレット記載の『希望販売価格』『キャンペーン価格』は参考価格であり、販売店からの実際の販売価格ではございません。  
ご注文の際には販売店様へご確認くださいませようお願い申し上げます。  
※部品の在庫状況によって、キャンペーンの終了が早まる、またはキャンペーン対象外となる製品が出てくる可能性があります。

前処理ワークフローをワンランク上へ

## Vac Elut 20 マニホールド & アクセサリー

- ✓ 20検体同時処理が可能なマニホールド
- ✓ 大容量にも対応可能な空カートリッジ
- ✓ 固相カートリッジやシリンジなどを接続するアダプター



部品番号	品名	価格 (税別)
12234103	Elut 20 マニホールド、16 x 100 mm 試験管用コレクションラック付き	¥207,000→キャンペーン価格¥165,600
12131012	Elut 空 SPE カートリッジ 60 mL (100 個)	¥33,000→キャンペーン価格¥26,400
12131001	Bond Elut アダプタキャップ、1、3、および 6 mL Bond Elut カートリッジ用 (15 個)	¥19,000→キャンペーン価格¥15,200

## Altura Poroshell 120 PFAS カラム

- ✓ 超短鎖 PFAS (C1~C3)を確実に保持
- ✓ C1~C18 PFASを1度の注入で分析可能
- ✓ デイレイカラムにより、システム由来のバックグラウンド (TFA・PFBAなど) を分離



部品番号	品名	価格 (税別)
227205-007	Altura Poroshell 120 PFAS カラム、2.7 µm、2.1 × 50 mm	¥147,000→キャンペーン価格¥117,600
227210-007	Altura Poroshell 120 PFAS カラム、2.7 µm、2.1 × 100 mm	¥175,000→キャンペーン価格¥140,000
227215-007	Altura Poroshell 120 PFAS カラム、2.7 µm、2.1 × 150 mm	¥203,000→キャンペーン価格¥162,400
027403-007	Altura Poroshell 120 PFAS デイレイカラム、2.7 µm、4.6 × 30 mm	¥126,000→キャンペーン価格¥100,800

## ※PFAS標準試薬も取り揃えております (キャンペーン対象外)

部品番号	品名	価格 (税別)
PFS-533-IDS	533 同位体希釈 PDS	¥146,000
PFS-533-NAS	533 ネイティブ化合物 PDS	¥68,000
PFS-537-APDS	537.1 Analyte primary dilution std	¥63,000
PFS-537-IPDS	537.1 Internal primary dilution std	¥58,000
PFS-537-SPDS	537.1 Surrogate primary dilution std	¥77,000
PFS-8327-SSM	8327 サロゲートスパイクミックス	¥144,000
PFS-8327-TAM	8327 ターゲット化合物ミックス	¥57,000

# アジレント Poroshell 120カラム サマーキャンペーン2026

高速・高分離・省溶媒化に役立つ高性能カラムが  
期間限定で20%オフ


## 汎用C18カラムを含む豊富なラインナップ

	部品番号	品名	価格（税別）
逆相 汎用	695775-902	Poroshell 120, EC-C18, 2.1x100mm, 2.7um	¥114,000 → キャンペーン価格 ¥91,200
逆相 高 pH	695775-702	Poroshell 120, HPH-C18, 2.1x100mm, 2.7um	¥124,000 → キャンペーン価格 ¥99,200
逆相 低 pH	685775-902	Poroshell 120, SB-C18, 2.1x100mm, 2.7um	¥114,000 → キャンペーン価格 ¥91,200
HILIC	685775-924	Poroshell 120 HILIC-Z, 2.1x100mm, 2.7um, T	¥186,000 → キャンペーン価格 ¥148,800


InfinityLab  
Poroshell 120

### 結合相モデル


**EC-C18**  
汎用で酸、塩基、中性化合物での優れたピーク形状と効率。ファーストチョイスに最適。



**SB-C18**  
低 pH における優れた安定性  
高酸性条件における優れたピーク形状




**HPH-C18**  
高 pH 対応の設計により非常に長い寿命を実現、特に高 pH 条件下で顕著な堅牢な性能と長寿命 EC-C18 と同等の選択性

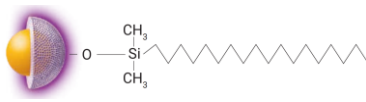


InfinityLab  
Poroshell 120

### 結合相モデル


**CS-C18**  
異なる選択性で高 pH 対応  
低イオン強度移動相条件下での塩基性化合物のピーク形状とサンプル数が向上




**Aq-C18**  
分析困難な極性化合物のリテンションが向上すると同時に、非極性化合物を分離  
100% 水性移動相が使用可能



**HILIC-Z**  
高極性または荷電化合物の優れたリテンションを実現 高 pH または高温での堅牢な性能

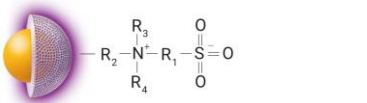

**PFP**  
芳香族化合物とハロゲン化合物で固有の選択性

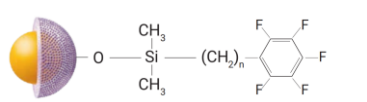

## キャンペーン内容

キャンペーン対象製品をお買い上げいただけますと、

キャンペーン期間中何度でも定価より**20%OFF**でご提供いたします。

## キャンペーン期間 2026年10月2日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 3415** とご連絡ください。

お願い/注意事項

※在庫状況により、納入までにお時間を頂く場合がございます。納期に余裕を見てご注文のご検討をお願いします。

※本リーフレット記載の『希望販売価格』『キャンペーン価格』は参考価格であり、販売店からの実際の販売価格ではございません。ご注文の際には販売店様へご確認くださいませすようお願い申し上げます。

※部品の在庫状況によって、キャンペーンの終了が早まる、またはキャンペーン対象外となる製品が出てくる場合がございます。


## 【カラム内径・長さ・粒子径の最適な選択】

項目	選び方のポイント
カラム内径	<ul style="list-style-type: none"> <li>標準的な条件：4.6 mm</li> <li>溶媒を節約したい場合：3.0 mm</li> <li>微量分析・MS用途：2.1 mm</li> </ul>
カラム長さ	<ul style="list-style-type: none"> <li>分析時間を短くしたい： 30～100 mm（短いカラム）</li> <li>分離を重視したい： 150～250 mm（長いカラム）</li> </ul>

項目	選び方のポイント
1.9µm UHPLC	<ul style="list-style-type: none"> <li>UHPC最高性能</li> <li>最大圧力：1300bar</li> <li>1290Infinity対応</li> </ul>
2.7µm HPLC UHPLC	<ul style="list-style-type: none"> <li>低圧でのUHPLC性能</li> <li>最大圧力：600bar</li> <li>1260Infinity/汎用LC対応</li> </ul>
4.0µm HPLC	<ul style="list-style-type: none"> <li>HPLCの性能向上</li> <li>最大圧力：600bar</li> <li>1220Infinity対応</li> </ul>

## 【高速分析・省溶媒化の例】

既存分析法のカラムをPoroshellカラムに変更することで、コアシェル型充填剤の優れた分離能とスループットが得られます。\*カラム長さに合わせてグラジエントプログラムを変更

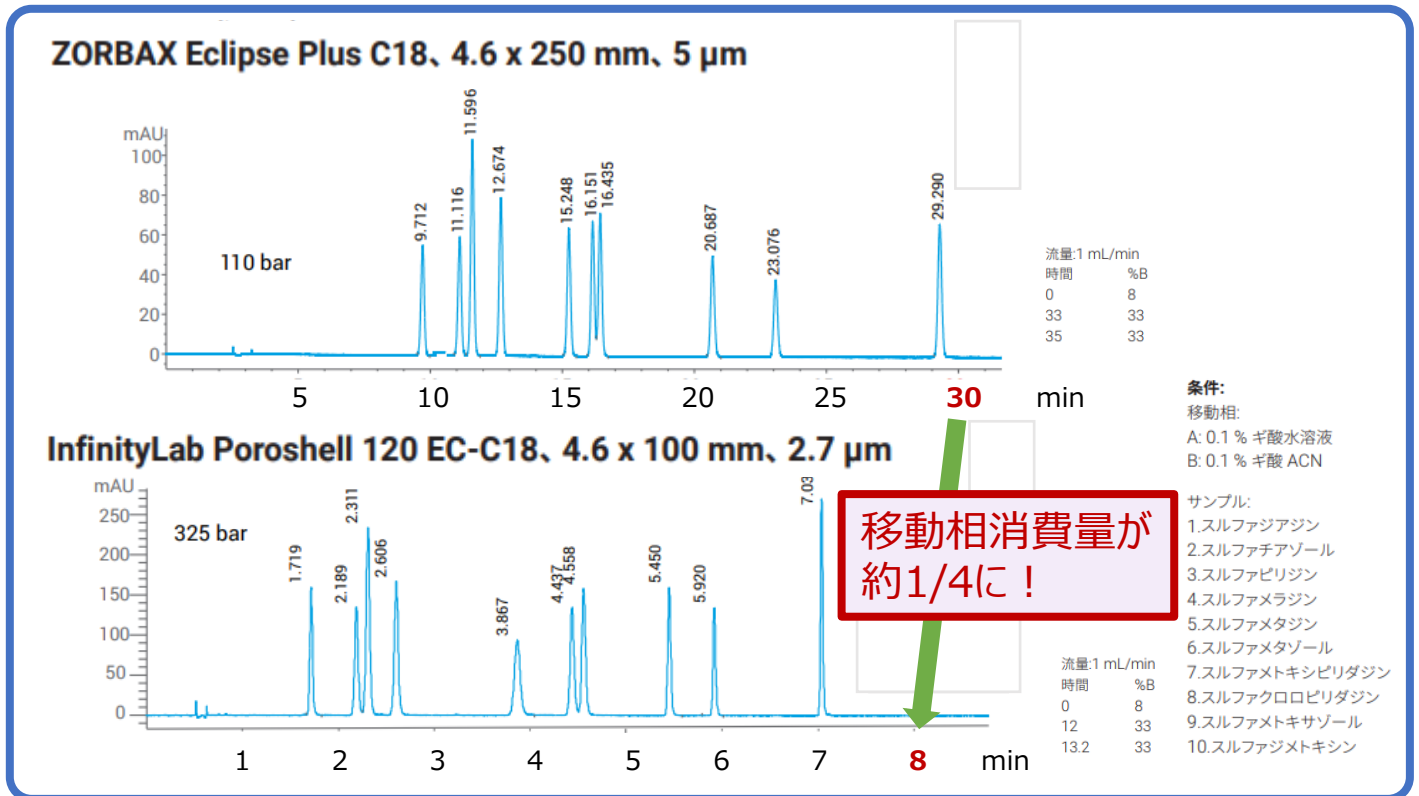

アジレントではデモカラム制度を行っております。  
購入の前に試しに使ってみたいというお客さまは、  
弊社販売店もしくはアジレントへお気軽にお問い合わせください！

InfinityLab Poroshell 120カラム  
キャンペーン対象製品はこちら→

<https://aglt.co/2026-Summer-Poroshell>



# アジレント ラボセーフティツール サマーキャンペーン2026

## セーフティキャップ セーフティパージボトル



5043-1217 ¥12,000⇒**キャンペーン価格 ¥9,600**

セーフティキャップ, GL45 1ポート  
3.2 mmチューブ用フィッティング, PFA×1個入  
5043-1190 タイムストリップ付バントバルブ×1個入



5043-1218 ¥14,000⇒**キャンペーン価格 ¥11,200**

セーフティキャップ, GL45 2ポート  
3.2 mmチューブ用フィッティング, PFA×2個入  
5043-1190 タイムストリップ付バントバルブ×1個入



5043-1192 ¥18,000⇒**キャンペーン価格 ¥14,400**

変換アダプタ PTFE GL45(M) - GPI38(F)  
GL45キャップをGPI38に変換するアダプタ  
※ガロン瓶への取り付けはこちらをご利用ください



5043-1216 ¥4,500⇒**キャンペーン価格 ¥3,600**

3.2 mmチューブ用フィッティング, PFA, 2個入  
※写真は3個



5043-1215 ¥4,500⇒**キャンペーン価格 ¥3,600**

2.3 mmチューブ用フィッティング, PFA, 2個入  
※写真は3個



5043-1198 ¥7,300⇒**キャンペーン価格 ¥5,840**

スクリュープラグ 1/8インチ, PTFE, 2個入  
※使用しないポートがある場合にご利用ください  
※写真は3個個



5043-1214 ¥4,500⇒**キャンペーン価格 ¥3,600**

1.6 mmチューブ用フィッティング, PFA, 2個入  
※写真は3個



5043-1190 ¥3,700⇒**キャンペーン価格 ¥2,960**

タイムストリップ付きバントバルブ, PTFE, 1 μm  
※取り付け時に表面を押してタイムストリップをスタート



5043-1193 ¥17,000⇒**キャンペーン価格 ¥13,600**

廃液ボトル用タイムストリップ付きチャコールフィルタ  
※取り付け時に表面を押してタイムストリップをスタート



(a)



(b)

廃液タンクには下記のものが必要です。

(a) 5043-1196 ¥4,000⇒**キャンペーン価格 ¥3,200**

6L 廃液ボトル×1個入

(b) 5043-1220 ¥21,000⇒**キャンペーン価格 ¥16,800**

セーフティキャップ, GL45 4ポート、  
1リークホース (内径6.5 mmチューブ)、フィッティング×4個入  
※別途5043-1193 チャコールフィルタが必要



(a)



(b)

5043-1340 ¥69,000⇒**キャンペーン価格 ¥55,200**

セーフティスタータキットおよびセーフティパージボトル

(a) 5043-1339 ¥27,000⇒**キャンペーン価格 ¥21,600**

セーフティパージボトル

(b) 5043-1222 ¥46,000⇒**キャンペーン価格 ¥36,800**

セーフティキャップスタータキット  
キャップ×4 (5043-1217 ×3, 5043-1218 ×1)  
タイムストリップ付きバントバルブ 5043-1190 ×4、  
フィッティング 3.2 mm ×4

## キャンペーン内容

キャンペーン対象製品をお買い上げいただけます、

キャンペーン期間中何度でも定価より**20%OFF**でご提供いたします。

## キャンペーン期間 2026年10月2日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 3415** とご連絡ください。

### お願い/注意事項

- ※在庫状況により、納入までにお時間を頂く場合がございます。納期に余裕を見てご注文のご検討をお願いします。
- ※本リーフレット記載の『希望販売価格』『キャンペーン価格』は参考価格であり、販売店からの実際の販売価格ではございません。ご注文の際には販売店様へご確認くださいませようお願い申し上げます。
- ※部品の在庫状況によって、キャンペーンの終了が早まる、またはキャンペーン対象外となる製品が出てくる可能性があります。



**Agilent**

Trusted Answers

## InfinityLab セーフティキャップ



設置例（左：移動相、右：廃液）

<交換時期がわかるタイムストリップ>

開始時

3ヶ月後

6ヶ月後




HPLCで通常用いられるアセトニトリルやメタノール、THFなどの有機溶媒は有害物質です。そのため、ラボ大気内のこれらの溶媒の濃度は最低限に抑える必要があります。移動相や廃液、および複数のラインを溶媒でパージする洗浄時などに、溶媒の蒸発を防ぐことは、分析者の健康にとって重要です。

## InfinityLab セーフティパージボトル

従来のパージプロセスでこのような問題はありませんか？

- ✓ 溶媒蒸気が空気中に流出
- ✓ チューブを抜く際に溶媒フィルタが落下
- ✓ 吸込み口がいつの間にか溶媒から出てしまい、空気を吸ってしまう

➡ **アジレントのパージボトルで解決！**

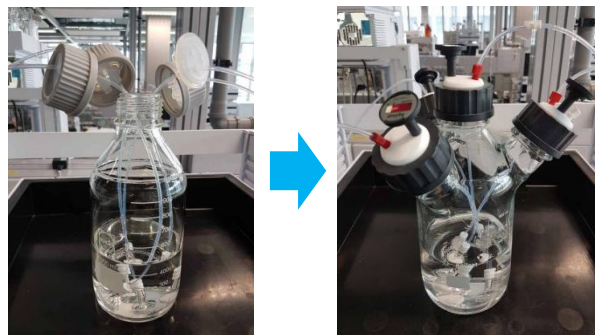

## (参考) 化学物質の管理が大きく変わろうとしています

厚生労働省は、化学物質による労働災害を防止するため、労働安全衛生規則等の一部を改正しました。これまで規制の対象外であった有害な化学物質を主な対象として、国によるばく露の上限となる基準の策定、危険性・有害性情報の伝達の整備拡充等を前提として、事業者が、リスクアセスメントの結果に基づき、ばく露防止のための措置を適切に実施する制度を導入するものです。

### <新たな仕組みのポイント>

- ✓ 危険性・有害性の**情報の伝達**（譲渡・提供時のラベル表示、SDS交付）
- ✓ **リスクアセスメント**の実施（製造・使用时）
- ✓ 労働者が**吸入する濃度**を国が定める基準以下に管理
- ✓ 薬傷や皮膚吸収による健康影響を防ぐための**保護眼鏡、保護手袋**等の使用

出展：

・厚生労働省「化学物質による労働災害防止のための新たな規制について～労働安全衛生規則等の一部を改正する省令（令和4年厚生労働省令第91号（令和4年5月31日公布））等の内容～」

[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121\\_00005.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html)

・労働安全衛生総合研究所「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会報告書の概要紹介～化学物質への理解を高め自律的な管理を基本とする仕組みへ～」

[https://www.jniosh.johas.go.jp/groups/ghs/arikataken\\_report.html#m03](https://www.jniosh.johas.go.jp/groups/ghs/arikataken_report.html#m03)

キャンペーン対象製品一覧と  
価格表はこちら



デモ機の貸し出しも受け付けております。  
お使いのHPLCで使用するチューブ外径をご確認の上、ご準備ください。

<https://aglt.co/2026-Summer-Safetycap>

# アジレント SPMEファイバ サマーキャンペーン2026

固相マイクロ抽出（SPME）が期間限定でお得です！

キャンペーン対象製品 SPME注入キット、位置決めガイド、SPME  
ファイバ（SPME Arrow含む）ライナー各種が定価より**20%OFF**



<キャンペーン対象製品例>

部品番号	品名	価格（税別）
5191-5870	SPME ファイバ®, PDMS-7/10, 緑, 3 個	¥72,000→キャンペーン価格¥57,600
5191-5873	SPME ファイバ®, DVB/PDMS 65/10, 紫, 3 個	¥72,000→キャンペーン価格¥57,600
5610-5870	Smart SPME ファイバ®, PDMS-7/10, 緑, 3 個	¥97,000→キャンペーン価格¥77,600
5610-5860	Smart SPME Arrow, 1.1 mm: DVB/PDMS	¥255,000→キャンペーン価格¥204,000
5190-4047	Liner, Ultra Inert, straight 1mm ID	¥5,300→キャンペーン価格¥4,240
5191-5877	非 SMART SPME マニュアル注入キット	¥144,000→キャンペーン価格¥115,200
G7371-67001	PAL3 位置決めリング (グレー), S/SL 注入口用	¥23,000→キャンペーン価格¥18,400

キャンペーン対象製品はこちら



## キャンペーン内容

キャンペーン対象製品をお買い上げいただけますと、  
キャンペーン期間中何度でも定価より**20%OFF**でご提供いたします。

## キャンペーン期間 2026年10月2日まで

<https://aglt.co/2026-Summer-SPME>

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 3415** とご連絡ください。


### お願い/注意事項

※在庫状況により、納入までにお時間を頂く場合がございます。納期に余裕を見てご注文の検討をお願いします。  
※本リーフレット記載の『希望販売価格』『キャンペーン価格』は参考価格であり、販売店からの実際の販売価格ではありません。  
ご注文の際には販売店様へご確認くださいませようお願い申し上げます。  
※部品の在庫状況によって、キャンペーンの終了が早まる、またはキャンペーン対象外となる製品が出てくる場合がございます。

 **Agilent**  
Trusted Answers

## SPME（固相マイクロ抽出）


- 固相マイクロ抽出（SPME）は、溶媒を使用しないサンプル前処理技術です。
- ファイバは幅広いラインナップの中から、お客様の分析に最適な製品をお選びいただけます。

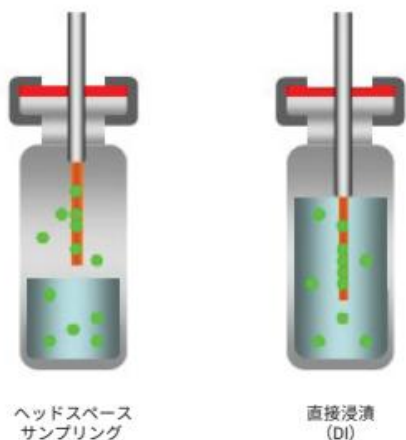

### SPMEファイバの利点

- 独自に試験したデザイン
- 溶媒が不要
- 自動化が容易
- サンプルを非破壊で分析
- ファイバは再利用可能
- GCまたはHPLC機器に対応

### ■ SPMEに必要な製品（マニュアルの場合）

	製品名	価格
	マニュアルSPME注入キット (P/N 5191-5877)	¥144,000→キャンペーン価格¥115,200
	位置決めリング (P/N G7371-67001)	¥23,000→キャンペーン価格¥18,400
	注入口ライナー 1mm (P/N 5190-4047) ※SPME Arrowの場合は2mmのライナーをご選択ください	¥5,300→キャンペーン価格¥4,240
	各種SPMEファイバ	種類によって価格が異なります

取り扱い方法やファイバーの選択については下記QRコードよりご確認ください



SPMEの基礎



SPMEの取り扱い説明書



SPMEファイバ  
ユーザーガイド