
トリプル四重極 LC/MS システム用 MassHunter12 日本語対応キャンペーン

(Windows 10 以上に対応)

トリプル四重極 LC/MS 用 MassHunter が 完全日本語対応になりました

- 測定条件設定画面、ワークリスト作成、化合物名の日本語表示が可能です
- Windows 7 のサポート終了に伴い、Windows 10 以上へのアップグレードキャンペーンと併せて、 MassHunter12 ヘアップグレードを推奨します
- 対象機種は担当営業にお問い合わせください



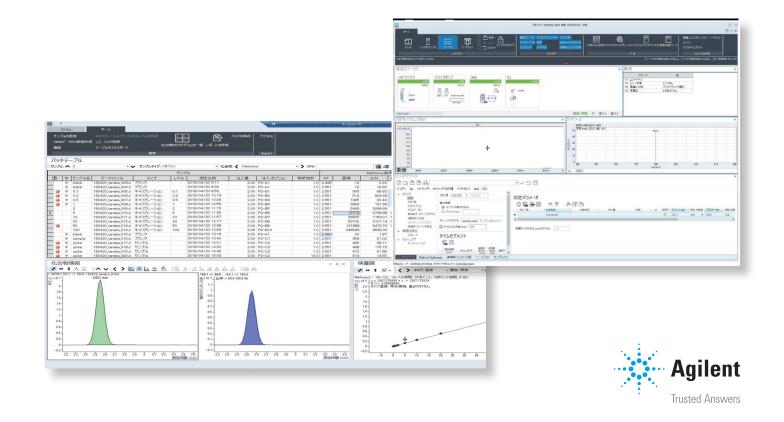



MassHunter12 の主な特徴

- 日本語完全対応により、化合物名のカタカナ表記、レポート表示が可能
- データベースサーバーとの組合せでフルコンプライアンス対応
- イオンソースパラメーターを含めた測定**メソッド最適化の自動化**
- MS チューニングの実行を時間指定可能で、アイドル時間に MS の最適化を完了
- Intelligent Reflex (iReflex) 機能によるワークフローの効率アップ・測定データの質を担保


Reflexive Injection Logic による iReflex

Intelligent Reflex は定量結果に対して、既定値を満たすまで再測定を行ったり、高速メソッドで検出したピークに対して、別メソッドで再測定を行うことが可能

定量結果の保証

キャリーオーバーが発生した際 検量線上限を超えた際 ブランク試料を追加します 注入量を下げて再注入 **Blank Injection** Test for Acquisition Above Cal. Carryover Range **Blank Injection** Acquisition Above Cal. Test for Carryover Range **Next Sample Next Sample**

サンプルスループット

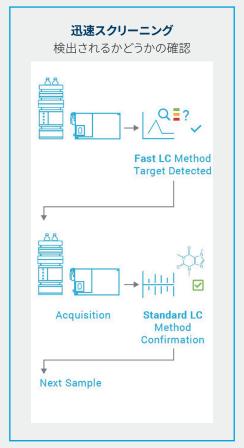



トリプル四重極 LC/MS に関する

最新アプリケーションノートや技術概要をまとめた特設サイトを公開中。

ご覧ください!

アジレント・テクノロジー株式会社

