



アジレント フラクションコレクタ トレイ・フラクシオン用容器のご紹介

アジレントのフラクシオンコレクタで使用する、主な消耗品についてご紹介いたします。

【プレートトレイ】

	部品番号	品名	コメント
1	G1364-84521	4プレートトレイ	別途プレート必要
2	G2258-60011	2プレート+2mL×10 バイアルトレイ	別途プレート必要 リカバリー可
3	G1364-84522	2プレート+10ファネルトレイ	別途プレート必要 リカバリー、大容量フラコレ可 G1364Cのみ使用可

下記のバイアルプレート、ウェルプレートが別途必要です。

【バイアルプレート & バイアル】

	部品番号	品名(プレート)	部品番号	品名(バイアル)
4	G2255-68700	54×2mL バイアルプレート	5181-3375 他	2mLバイアル
5	5022-6539	15×6mL バイアルプレート	9301-1377 他 5188-5369 他	6mLバイアル 5mL濃縮バイアル

	部品番号	品名(プレート)	コメント
6	5042-8544	試験管プレート	・試験管高さに注意 ・18mmΦ試験管
7	5022-6538	27×Eppendorf チューブ用プレート	・セーフティロックチューブ対応 ・Eppendorf 0.5、1.5、2mLチューブ





6mLバイアル





【ウェルプレート】

	部品番号	品名	コメント
8	5042-1386	96穴ウェルプレート	0.5mL、10個
9	5042-1385	96穴ウェルプレート	0.5mL、120個
10	5042-6454	96穴ディープウェルプレート	1mL、50個
11	5042-4402	96穴ディープウェルガラス インサートプレート	0.35mL、1個
12	5042-1388	384穴ウェルプレート	0.1mL、30個
13	5042-8502	96穴コニカルウェルプレート	0.18mL、25個
14	5042-1389	クロージングマット	96穴プレート用フタ、 OQ時に必要

5042-1389クロージングマットは、5042-1385、5042-1386、5042-6454のウェルプレートに対応

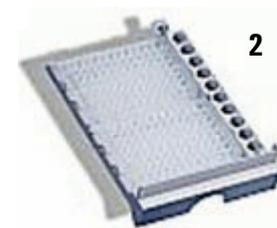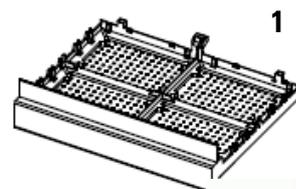

Eppendorfチューブ

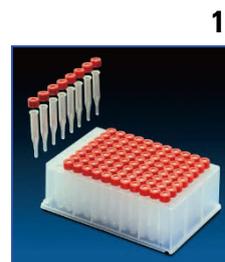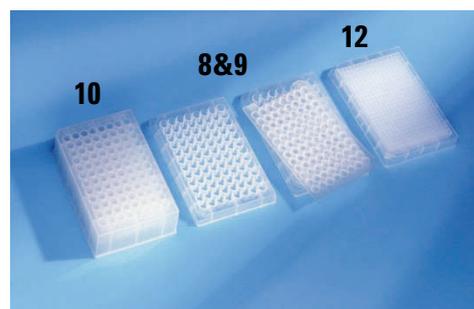

クロージングマット



【試験管トレイ & 試験管】

	部品番号	品名(トレイ)	部品番号	品名(対応試験管)
1	G1364-84516	12mmΦ×215本試験管トレイ	5022-6431 5022-6435	12mmΦ×100mm (11mL) 12mmΦ×48mm (5mL)
2	G1364-84525	16mmΦ×126本試験管トレイ	5022-6532 5022-6533	16mmΦ×100mm (19mL) 16mmΦ×48mm (9mL)
3	G1364-84524	25mmΦ×60本試験管プレート	5042-6470	25mmΦ×100mm (35mL)
4	G1364-54523	30mmΦ×40本試験管プレート	5042-6459 5042-6458	30mmΦ×100mm (45mL) 30mmΦ×48mm (20mL)




高さ48~100mm
試験管



1



2

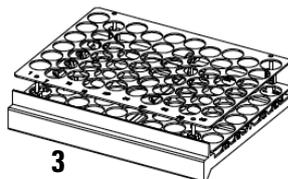

3



4

【フラクションコレクタ仕様】

	フラクションコレクタ (分析スケール) G1364C	フラクションコレクタ (分取スケール) G1364B
ニードル長さ	50mm (オプション20mm)	1mm
試験管高さ (最大)	48mm (オプション75mm)	100mm
フタをした試験管	対応可	対応不可
ファネルトレイ	対応可	対応不可



50mmニードル
G1364C 標準
最大容器高さ: 48mm
最大流量: 10mL/min



20mmニードル
G1364C オプション
最大容器高さ: 75mm
最大流量: 100mL/min



1mmニードル
G1364B 標準
最大容器高さ: 100mm
最大流量: 100mL/min

【バルブチューブ】

部品番号	品名	コメント
G1364-68712	分析スケール0.25mmID	G1364C標準付属
G1364-68723	分析スケール0.15mmID	オプション
G1364-68711	分取スケール0.8mmID	G1364B標準付属



【ファネルトレイ】 ファネルに接続する容器が別途必要です。

部品番号	品名	コメント	
5	G1364-84532	40ファネルトレイ	G1364Cのみ使用可
6	G1364-84522	2プレート +10ファネルトレイ	別途プレート必要 リカバリ、大容量フラコレ可 G1364Cのみ使用可




5



6

【G1364B/C 標準付属トレイ】

部品番号	トレイ	コメント	
7	G1313-44512	40×2mL バイアルハーフトレイ	標準付属
8	G1313-44513	15×6mL バイアルハーフトレイ	標準付属

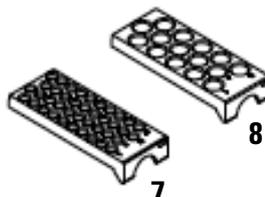

7

8

フラクション容器はカスタマイズも可能です。
詳細はお問合せください。

アジレント・テクノロジー株式会社

本社 〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1
カスタムコンタクトセンター ☎0120-477-111

※本文記載の内容は予告なく変更する場合があります。

www.agilent.com/chem/jp

Printed in Japan. Feb. 1, 2014
5991-4075JAJP

お問い合わせは

