

第十八改正日本薬局方 対応！

データインテグリティに完全対応した元素分析システム

医薬品向け

ICP-MS +

MassHunter/ECM XTシステム

2021年9月1日 ~ 2022年8月31日

幅広いダイナミックレンジで検出ができ、複雑なアプリケーションも簡単に条件設定ができ、ルーチン分析をよりスマートに行えます。データ管理システム：Agilent ECM XTを導入し、ソフトウェアもデータインテグリティに完全対応したシステムとなります。ぜひご検討ください。




Basic
IQOQ付

Agilent 7850 ICP-MS New
+ MassHunter/データ管理システムECM XT

特別価格でご案内：お問い合わせください

標準付属：7850 超高マトリクス導入(UHMI)システム

25%飽和食塩水や、Ba、Zn等を高濃度含む金属サンプルを無希釈で直接導入できます。プラズマ導入前にArガスで希釈をするため、装置へのマトリクス導入によるダメージを防ぎ、マトリックス減感を最小限に抑えて測定ができます。

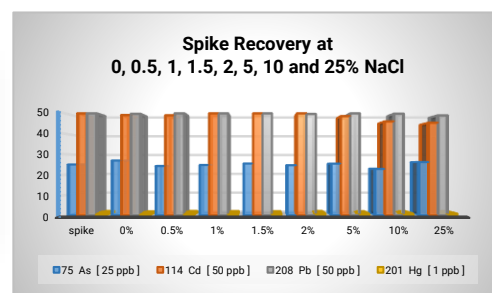

【ICP-MS仕様】7850 ICP-MS

- 7850 ICP-MS本体
 - MassHunterライセンス/バンドルPC x1 (ECM XT接続含む)
 - IQOQ一式
- ※超高マトリクス導入(UHMI)システム標準付属

【ECM XT仕様】MassHunter/ECM XT


- OpenLab ECM XTサーバー式 (サーバ筐体1台)
- ECM XTユーザライセンス 5ユーザ
- IQOQ一式
- ネットワーク ACE

【注】

- 1部屋に7850 ICP-MS、サーバを設置すること
- ドメイン名、各PCのホスト名、IPアドレスは弊社指定のみ。ユーザ様ご指定不可

拡張オプション1：7850 H2リアクション機能

7850は標準でHeコリジョン機能が搭載されていますが、一部の製剤に含有するマトリクス起因の干渉は低減できません。H2リアクション機能を拡張することで、干渉を低減し、As, Se等のより正確な分析が可能です。

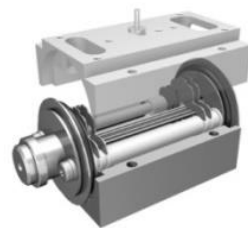

[拡張オプション1仕様]
H2リアクション機能

拡張オプション2：7850 有機溶媒対応

難溶解性、難分解性のサンプルを有機溶媒に溶解して測定する場合に必要なオプションです。Ar/O2オプションガスライン、1.5mm内径トーチなどが含まれます。

[拡張オプション2仕様]


- オプションガスライン（有機溶媒分析用酸素ライン）
- 同軸型ネブライザ [石英]
- 石英製スプレーチャンバー
- 石英製コネクタ管（希釈ガスポート付き）
- キャリアガスライン用コネクタ
- 有機溶媒導入キット
- サンプルライン用コネクタ
- Oーリング
- Advanced acquisition

※有機溶媒オプションのオンサイトトレーニングも追加可能

拡張オプション3：スタンドアローンでDI対応が難しい機器を接続

データインテグリティ対応が難しいスタンドアローンシステムを接続し、機器データを自動でセキュアなデータベースへ保管したい方にお勧めのオプション

SDMSの導入を検討されている方にお勧めのオプション

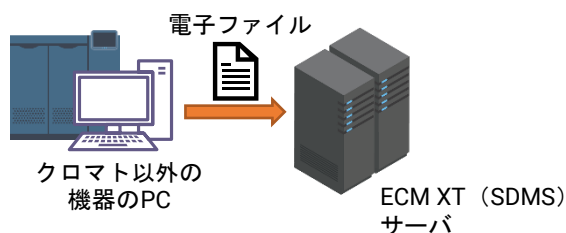

[拡張オプション仕様]


- スケジューラPC x1
- 対象機器接続ライセンスx1
- IQOQ（スケジューラ機能）

[注]

- スケジューラPC、ECM XTサーバの有線LANでの通信が必須

拡張オプション4：クロマト機器のデータやロール管理をサーバで一元化

スタンドアローンで使用しているLC、GCをネットワーク化し、データやロールの管理をサーバで一元管理したい方にお勧めのオプション

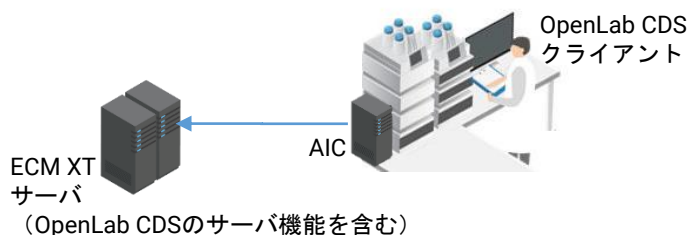

[拡張オプション仕様]

- AIC x1（PC本体、ライセンス）
- RDS端末機器 x1
- Agilent機器接続ライセンス x1
- IQOQ（AIC、クライアント）

[注]

- AIC、Agilent機器、ECM XTサーバは有線LANでの通信が必須
- 社内LAN接続は含まず

アジレント・テクノロジー株式会社
〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1
フリーダイヤル 0120-477-111 www.agilent.com/chem/jp

DE44426.7916898148