

新製品

Atomx XYZ パージアンドトラップ

TELEDYNE TEKMAR社の最新パージアンドトラップ(P&T)




Atomxの後継モデル
Lumin ベースの
オートサンプラー体型P&T

Agilent型番: **G8160A**

<主な特徴>

- 84検体バイアルトレイ (オプションで冷却機能)
- 従来のAtomxに比べコンパクトサイズ
70.1cm(W) * 58.42cm(D) * 49.5cm(H)
- Luminに搭載された機能を採用
 - ・ 水分除去システム (Moisture Control System) により
従来モデルに比べ、60%以上の水分除去
 - ・ トラップの冷却時間の短縮
 - ・ メンテナンス性の向上 (容易なトラップ交換など)
- Windows10対応のソフトウェア (Atomx XYZ TekLink software)
- USB接続 (PCとの接続)
- 従来のAtomxの機能を継承
 - ・ 希釈機能
 - ・ 土壌モード など


容易なトラップへのアクセス
実績あるU字管トラップ
トラップの冷却時間の短縮

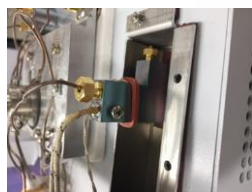

60%効率アップした
水分除去システム



内部標準ボトルの数：3

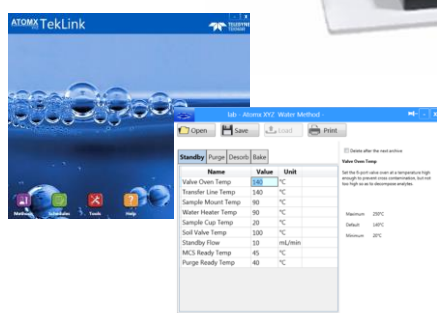

Windows10対応のソフトウェア
(Atomx XYZ TekLink software)

従来のAtomxとの比較

	Atomx XYZ	Atomx
P&T部	Luminベース	Stratumベース
バイアルトレイ数	84検体	80検体
サイズ	70.1cm(W) * 58.42cm(D) * 49.5cm(H) 43.1kg	83.1cm(W) * 59.2cm(D) * 67.3cm(H) 43.1kg
PCとの接続	USB	RS232C
制御ソフトウェア	Atomx XYZ TekLink software	Atomx TekLink software

アジレント・テクノロジー株式会社

〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1
カスタムコンタクトセンター
フリーダイヤル 0120-477-111
www.agilent.com/chem/jp