

# 同軸ネブライザの 画期的な洗浄ツール

## ネブライザクリーナ

### お使いのネブライザ、きちんと洗浄できていますか？

- －担当者によって洗浄のバラつきが出てしまう
- －ネブライザが詰まってしまう
- －石英製のため、割れる、傷つける事を恐れしっかり洗浄できていない
- －日頃の洗浄が正しく行えているのか、不安
- －そもそも装置やネブライザがアジレント製ではない



先端の詰まり

そんな悩みを解消！  
ネブライザクリーナがこちら

対応  
ICP-OES, ICP-MS用  
同軸ネブライザ  
一部他社製も対応



部品番号

品名

価格（円、税別）

G3266-80020

ネブライザクリーナ


57000円

※ネブライザクリーナはガラスネブライザのみ使用できます。

OneNebネブライザやVグローブネブライザでは使用できません。

ガラスまたは石英製のサンプル導入コンポーネントに、フッ酸を使用しないでください。

# ネブライザクリーナを使う理由

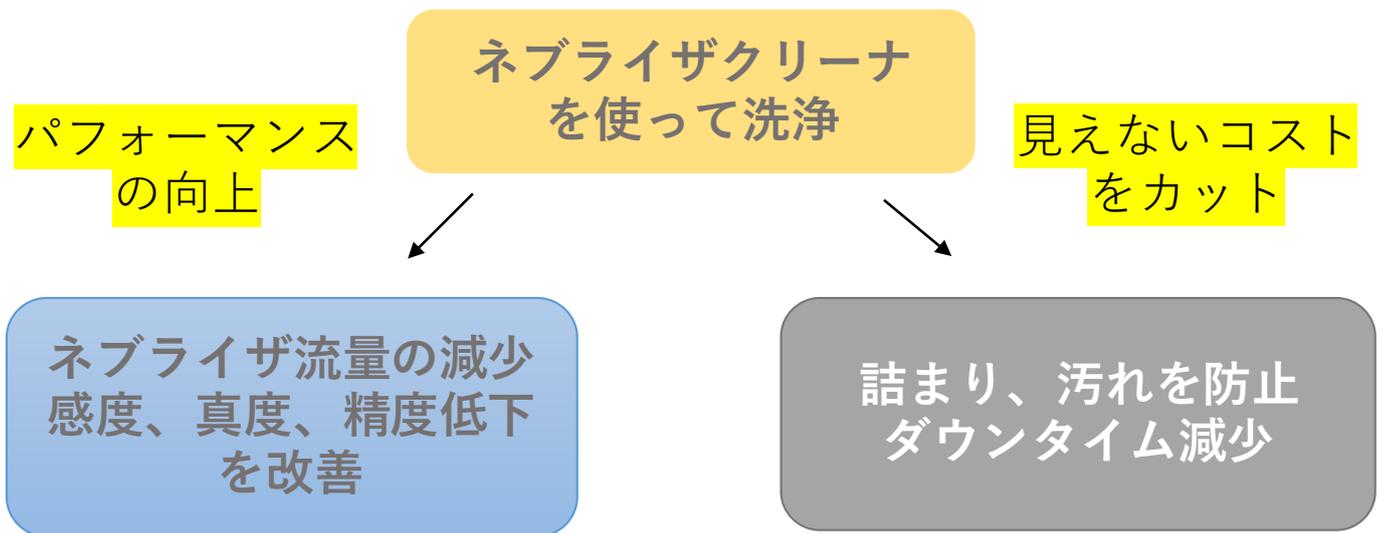

## 使い方は簡単！

- ①ネブライザクリーナにネブライザをセット
- ②適切な洗浄液でバックフラッシュ  
(エタノールまたはデコン90やアルコノックス2.5%など)

使用動画もWEBにて掲載中！  
日頃のメンテナンスに1本いかがですか？



↑ 図をクリックするとクリーナ使用動画にアクセスできます。再生3分後に使用動画の確認ができます。

リンク先：<https://youtu.be/N3hzFdwHEc0>

詳細はアジレント・テクノロジーカラム消耗品営業部まで0120-477-111