


ラボにおけるストレージ要件の変化に対応

Agilent OpenLab ECM XT

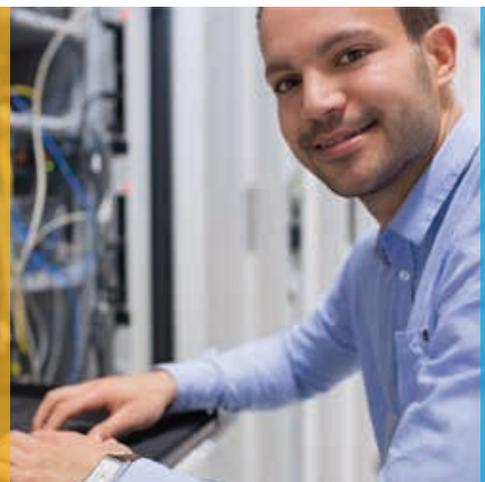

業界標準のインフラストラクチャでメンテナンスの手間を低減

通常、新しいプラットフォームを追加すると、IT 部門の負担が増すものです。このためアジレントでは、IT 部門への影響を最小限に抑えることを優先しています。OpenLab ECM XT が、他のコンテンツ管理ソリューションとどう違うのかについてご紹介します。

最新性と安全性を実現

最新オペレーティングシステムに対応した OpenLab ECM XT ソフトウェアを用いることで、分離されたラボシステムをメインスタックに戻すことができます。

システムの管理とメンテナンスを簡素化

導入と更新が簡単になります。ライセンスコードを入力するだけで機能が追加されるため、モジュールをインストールする必要がありません。

他のソリューションと異なり、OpenLab ECM XT は 1 つのデータベースを使用するため、スペースを節約し、データベースの管理作業を軽減し、バックアップ作業を一元化することができます。また、さまざまなデータベースに対応しているため、好みのソリューションを柔軟に使用できます。

さらに、OpenLab CDS クライアント/サーバー構成との組み合わせも容易です。データの移行は一切不要です。

導入時間と展開時間を短縮

エンドユーザーは、クライアントソフトウェアをインストールする必要がありません。このため、導入とバリデーションの作業が大幅に削減されます。また、アジレントでは、拡張の簡略化と機能の拡充に継続的に取り組むことで、お客様の作業効率化と事業拡大を支援します。急成長を遂げる組織とクラウドベースのストレージなどの革新技術をサポートする構成については、担当営業までお問い合わせください。

セキュリティを重視

OpenLab ECM XT は、単にパスワードによるアクセス制御、柔軟な権限設定、Active Directory の統合、バージョンの追跡を提供するだけではありません。厳密な侵入テストを通じて、OpenLab ECM XT がサイバー攻撃の侵入経路として利用されることを防ぎます。また、セキュリティを重視するお客様は、HTTPS を導入して、すべての情報が転送中に暗号化されるようにすることができます。

Agilent
OpenLab



IT 部門の作業負荷を軽減

- 最新のオペレーティングシステムとデータベースに対応
- メンテナンスが容易で信頼性の高いサポート
- 卓越したセキュリティとデータインテグリティ

詳細については、アジレントの担当者にお問い合わせいただくか、次の Web サイトをご覧ください。

www.agilent.com/chem/openlabecmxt

システム要件

サポートされるオペレーティングシステム

- Windows Server 2012 R2 Standard または Datacenter
- Windows Server 2016 Standard または Datacenter

また、OpenLab ECM XT のアドオンコンポーネント（インポートサービスなど）は、次のオペレーティングシステムに対応します。

- Windows 7 SP1 (64 ビット版) Professional または Enterprise エディション
- Windows 10 (64 ビット版) Professional または Enterprise エディション

サポートされるデータベース

- Microsoft SQL Server 2012 SP4 Standard および Enterprise
- Microsoft SQL Server 2014 SP2 Standard および Enterprise
- Microsoft SQL Server 2016 SP2 Standard および Enterprise
- Microsoft SQL Server 2017 Standard および Enterprise
- PostgreSQL サーバー 10.3
- Oracle 12c R2

ウェブブラウザ

- OpenLab ECM XT は、次のブラウザでテスト済みです。
 - Microsoft Internet Explorer 11
 - Microsoft Edge
 - Google Chrome

ネットワーク

OpenLab ECM XT は、サーバーとクライアントコンピュータ間の通信に標準の TCP/IP プロトコルを使用します。OpenLab ECM XT への接続には、TCP/IP ネットワークが必要です。

重要データの保護、保存、アクセスについては、アジレントの担当者にお問い合わせいただくか、次の Web サイトをご覧ください。

www.agilent.co.jp/chem/openlab

ホームページ

www.agilent.com/chem/jp

カスタムコンタクトセンタ

0120-477-111

email_japan@agilent.com

本製品は一般的な実験用途での使用を想定しており、医薬品医療機器等法に基づく登録を行っておりません。本文書に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに変更されることがあります。

アジレント・テクノロジー株式会社
© Agilent Technologies, Inc. 2019
Printed in Japan, July 17, 2019
5991-8645JAJP